


Liber L803 / Eskal L839



Surmatelas à alternance de pressions

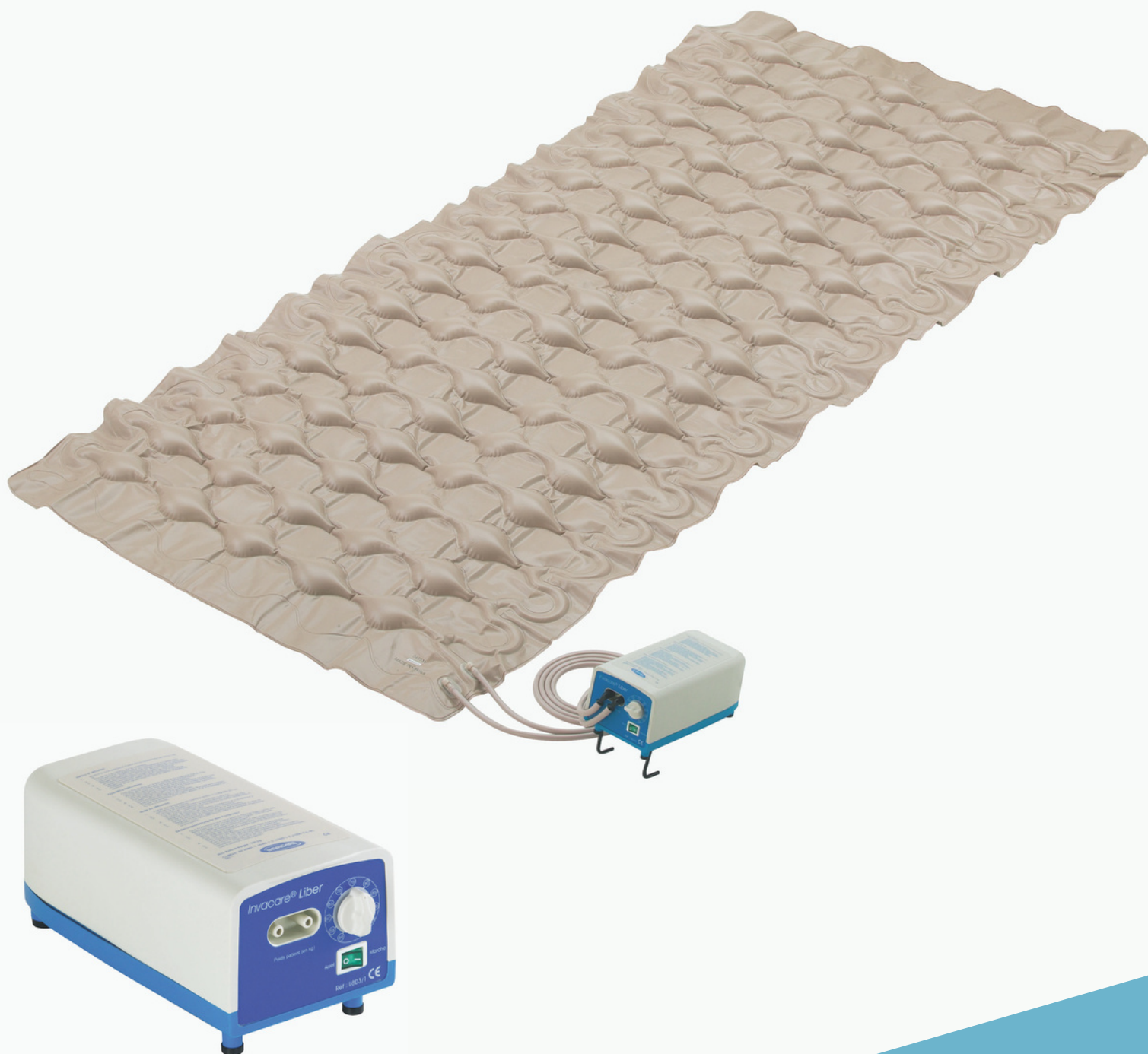

Le surmatelas Eskal d'Invacare® est facile à installer sur un matelas existant. Le surmatelas est constitué de deux sections qui, par l'alternance mutuelle des pressions, procure un bon confort au lit.

Les variations de de la pression d'air dans le matelas créent une alternance des pressions sur le corps être utilisé en cas de léger risque d'escarres.



Caractéristiques ▼

- Pour des patients ayant un risque d'escarre moyen à élevé, score de norton inférieur ou égal à 14, alité plus de 14h/jour.
- Compresseur à air à réglage manuel, réglage selon le poids du patient de 50 à 100 kg. Ne peut que libérer 5 litres par minute.
- Basse pression continue.
- Surmatelas à cellules individuelles déformables en PU.
- Ce surmatelas est à pression alternée par cycle de 10 minutes pour éviter les pressions prolongées et excessives.



Invacare **Eskal** matelas à alternance de pressions (L839)



Invacare **compresseur Liber (L803)**

Coloris ▼



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements sur ce produit, consultez notre site web.

Données techniques matelas Eskal	
Largeur	890 mm
Longueur	1980 mm
Hauteur	68 mm
Poids du matelas	2 kg
Poids max. utilisateur	100 kg

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique